

Anwendungshinweise zum Dosieraerosol

Reinigung:

Wischen Sie die Außen- und Innenseite des Mundstücks 1x wöchentlich mit einem trockenen Tuch (kein Wasser) ab.

Lagerung:

Nicht über 25°C und setzen Sie es nicht der Sonne oder Frost aus.

Schritt für Schritt richtig inhalieren

1



Bitte überprüfen Sie vor der Inhalation den Dosiszähler, ziehen dann die Schutzkappe vom Mundstück ab und kontrollieren, ob das Mundstück frei von Fremdkörpern ist.

2



Atmen Sie langsam und tief aus – atmen Sie nicht in den Inhalator hinein.

3



Halten Sie den Inhalator mit Daumen oder Zeige- bzw. Mittelfinger (so wie abgebildet). Umschließen Sie das Mundstück mit Ihren Lippen und neigen Sie Ihren Kopf leicht zurück.

4



Drücken Sie die Wirkstoffkartusche nach unten, um den Sprühstoß auszulösen, während Sie gleichzeitig tief und langsam durch den Mund einatmen.

5



Halten Sie für 5–10 Sekunden oder so lange, wie es Ihnen ohne Anstrengung möglich ist, die Luft an. Nehmen Sie anschließend den Inhalator aus dem Mund.

6



Atmen Sie langsam durch die Nase oder die fast geschlossenen Lippen (Lippenbremse) aus. Setzen Sie die Schutzkappe auf und überprüfen Sie erneut den Dosiszähler, der mit jedem Sprühstoß herunterzählt. Für einen 2. Sprühstoß halten Sie den Inhalator etwa eine halbe Minute aufrecht und wiederholen dann Schritt 2–6.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.



Reinigung und Lagerung


Für eine einwandfreie Funktion Ihres Dosieraerosols haben wir Ihnen hier einige wichtige Informationen zusammengestellt:




Reinigung

Mindestens 1 x wöchentlich mit einem **trockenen Tuch** direkt nach der Inhalation das Mundstück außen und besonders gründlich innen an der Sprühaustrittsdüse reinigen.

Kein Wasser!

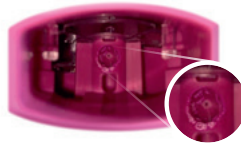

Düse verstopft

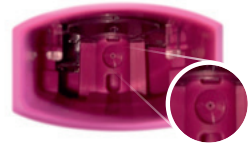

Düse sauber ✓

Der Wirkstoff Beclometasondipropionat kann durch Feuchtigkeit unlösliche, weiße Kristalle bilden und sich als hartnäckige Ablagerung in der Sprühaustrittsdüse festsetzen. Meist entstehen sie durch das Ausatmen in den Inhalator, eine mangelnde Reinigung des Kunststoffmundstücks oder eine falsche Lagerung.



Lagerung

Vor der ersten Anwendung sollten Sie das Dosieraerosol (sowie Mehrfachpackungen) im Kühlschrank (bei 2–8 °C) aufbewahren.

Nach der ersten Anwendung lagern Sie das in Gebrauch befindliche Dosieraerosol bei Raumtemperatur (bis max. 25 °C) und möglichst geringer Luftfeuchtigkeit. Bitte nicht im Badezimmer oder der Küche lagern und nicht zurück in den Kühlschrank legen.

Weitere ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder in Ihrer Apotheke.

Sie haben ein graues Dosieraerosol?

Ein anschauliches Video über die optimale Reinigung finden Sie zudem hier:



Sie haben ein pinkes Dosieraerosol?

Ein anschauliches Video über die optimale Reinigung finden Sie zudem hier:

